

coldes Textilien GmbH

**Heinweis:**

Diese Masken sollten NICHT getragen werden, von Kindern unter 2 Jahren, von Personen die Schwierigkeiten beim Atmen haben und von Personen die handlungsunfähig oder nicht in der Lage sind, diese Masken ohne Hilfe wieder abzunehmen. Die Maske muss sofort gewechselt werden, wenn es beschädigt ist oder nass wird.

Verwenden Sie die Maske nicht wieder. Es wird empfohlen, die maximale Anwendungsdauer von 8 Stunden nicht zu überschreiten. Waschen, Desinfizieren oder Erhitzen Sie die Maske nicht.

Personen, die gegen Polypropylen allergisch sind, dürfen diese Maske nicht verwenden.

**Sicherheitsausrüstung**

- Kontrollieren Sie die Maske, bevor Sie in den Anwendungsbereich eintreten.
- Im Arbeitsbereich muss mindestens 19,5% Vol. Sauerstoff vorhanden sein. Andernfalls kann die Maske nicht verwendet werden.
- Die Masken schützen Sie vor Gas und Dampf nicht.
- Wechseln Sie die Maske, wenn der Atemwiderstand ansteigt.
- Wiederholen Sie den Vorgang 1-2-3-4 im Falle einer Undichtigkeit.

**Note:**

Masks should NOT be worn by children under the age of 2 or anyone who has trouble breathing, is unconscious, incapacitated, or otherwise unable to remove the mask without assistance.

This mask must be immediately changed when it is damaged or wet.

This mask is just for single use.

Do not reuse the mask. We recommend the maximum application time of 8 hours not to be exceeded. Do not wash, disinfect, or heat the mask.

People who are allergic to polypropylene must not use this mask.

**Safety Equipment**

- Control the mask before get in the using area.
- In working area there must be at least %19,5 oxygen otherwise mask not able to use.
- The masks do not protect you from gases and steam
- Change the mask if there will be any obvious and realizable extra air resisting.
- If there is any leakage redo the 1-2-3-4 process again.

Notifizierter Körper/Notified Body  
Universal Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. NB2163

**Sicherheitsausrüstung  
Safety Equipment**

FFP2 NR  
FAGO 101  
FACE SCHUTZMASKE / MASK



**Lagerbedingungen:**

Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung; Luftfeuchtigkeit konstant < 80% halten; Lagertemperatur zwischen -20°C - +40°C; Setzen Sie das Produkt keinen ätzenden Gasen aus; Für gute Belüftung sorgen; Im Optimalfall im Reinraum lagern.

10

STCK  
PCS

coldes Textilien GmbH

**HERSTELLER**

FAGO MEDİKAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

15 Temmuz Mah. Cami Yolu Cad.

No: 106/Z1 Bağcılar - İstanbul - Türkiye

Tel: +90 212 630 67 55 - +90 212 630 67 56

www.famexmask.com e-mail: info@fagomedikal.com

**Deutschland Distributor**

COLDES Textilien GmbH  
Am Alten Fließ 66 50129 Bergheim  
Deutschland

www.coldes-medical.com

PRODUKTIONSdatum : 21/01/2021

PRODUCTION DATE

MINDESTENS HALTBAR BIS : 21/01/2023


BEST BEFORE

LOT F-003-2021-01-1-1


ISO 9001 :2015 (DMS)  
ISO 14001 :2015  
ISO 13485 :2016  
ISO 14001 :2015 (EMS)  
ISO 45001 :2018 (OHSMMS)



8 682887 043121

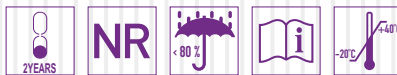

coldes Textilien GmbH

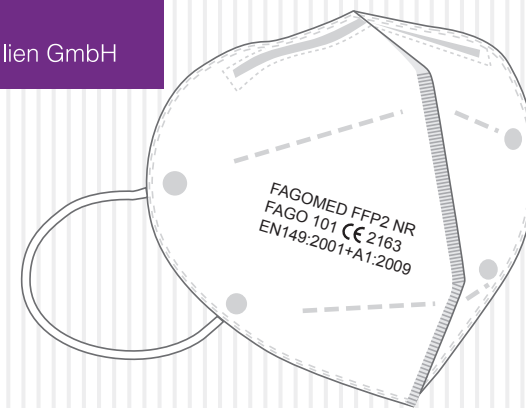

Automatisch absorbierender Filtertyp Anti-Fog / Automatic Absorbing Filter Type Anti-Fog

Verbesserte Atemschutzmaske / Enhanced Respirator

**SCHÜTZMASKE  
PROTECTIVE MASK**

**FFP2 NR**  
EN149:2001+A1:2009



MASKE / MASK / MASQUE / MASKEER  
MASCHERE / MASCARA / MASCARAR



10

STCK  
PCS

- Hohe Filtrationseffizienz
- Niedriger Atemwiderstand
- Bequemer zu tragen

- More Comfortable to Wear
- Low Respiratory Resistance
- High Filtration Efficiency



**GEBRAUCHSANWEISUNG**

- Nicht berühren**  
Berühren Sie die Maske nicht außerhalb des Gefahrenbereichs. Setzen Sie in diesem Fall sofort eine neue Maske auf.
- Maske austauschen**  
Sollten Sie Nässe und Feuchtigkeit innerhalb oder außerhalb der Maske spüren, setzen Sie bitte sofort eine neue Maske auf.
- Maximale Tragezeit**  
Die maximale Zeit, die Sie Ihre Maske einmal tragen können, beträgt 8 Stunden. Bitte überschreiten Sie die maximale Tragezeit nicht.
- Abnehmen**  
Nehmen Sie die Maske nur ab, indem Sie die Ohrbügel nach unten ziehen.



**USER INSTRUCTIONS**

- Do not touch**  
Do not touch the mask outside in the danger area. In this case, immediately put on a new mask.
- Change your mask**  
In case of feeling wetness and humidity either inside or outside of your mask, please put on a new mask immediately.
- Maximum wearing time**  
The maximum time that you can wear your mask, for one time is 8 hours. Please do not exceed maximum using time.
- Taking the mask off**  
Take off the mask only by pulling down the ear straps.

Turkey  
Discover  
the potential

CE 2163

